


set per terapia oncologica *set for oncological therapy*



SET PER TERAPIA ONCOLOGICA / SET FOR ONCOLOGICAL THERAPY

**Multimedical propone dispositivi per la preparazione e la somministrazione in terapia oncologica.
Multimedical offers preparation and administration devices in oncological therapy.**

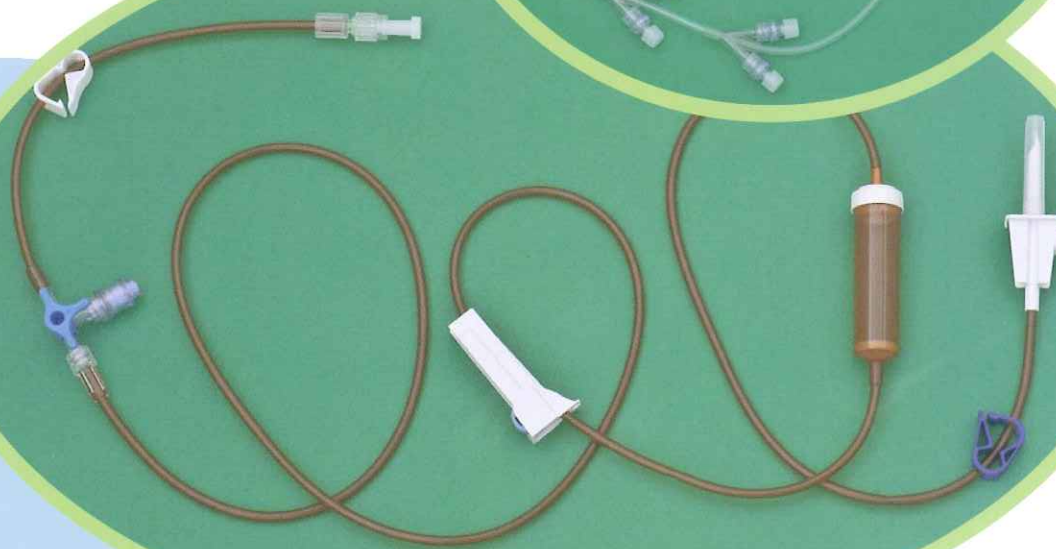

Set per la ricostituzione, la preparazione e il trasferimento di medicinali:

Dispositivi con perforatore con filtro 0,22 micron e filtro soluzione 5 micron. Disponibili modelli con valvola per la connessione di altri dispositivi e siringhe senza l'utilizzo di aghi (Direttiva 2010/32/UE).

Set for dilution, extraction and transfer of drugs:

Devices with spike with 0,22 micron filter and 5 micron solution filter. Available models with valve for connection of other devices and syringes without using needle (Directive 2010/32/UE).



Set di preparazione per pompa:

Dispositivi per la connessione tra sacca o flacone contenente il farmaco per somministrazione con pompa.

I set presentano una o più connessioni unidirezionali con valvola di non ritorno per il collegamento di uno o più farmaci chemioterapici. Disponibili anche con tubo oscurato per le soluzioni fotosensibili.

Preparation set for pump:

Devices for connection between bag or bottle containing drug for administration with pump. The sets have one or more unidirectional connections with no return valve for the connection of one or more chemotherapy drugs. Available also with obscured tube for photosensitive solutions.



Set di connessione:

Dispositivi per la connessione tra sacca o flacone contenente il farmaco e il set di somministrazione al paziente a circuito chiuso. Multimedical propone vari modelli che possono presentare:

- valvola di non ritorno terminale.
- tubo oscurato per le soluzioni fotosensibili
- valvola needlefree terminale o in linea per l'accesso alla linea senza l'utilizzo di aghi per la riduzione del rischio di punture accidentali con aghi di infusione da parte del personale sanitario (Direttiva 2010/32/UE)
- filtro in linea 0,22 micron per formulazioni chemioterapiche a veicolo lipofilo (es. taxani) o di natura proteica che possono dare origine a problemi di precipitazione di particolato.

Connection Set:

Devices for connection between bag or bottle containing the drug and the administration set to the patient with a closed system.

Multimedical offers different models having:

- no return ending valve.
- obscured tube for photosensitive solution
- needlefree ending valve or in line for I.V. access without using needle to reduce the risk of needlestick injury with infusion needle by health personnel (Directive 2010/32/UE)
- in line filter 0,22 micron for chemotherapy formulations with a lipophilic vehicle (ex. taxanes) or with a proteic nature that can cause problems of precipitation of particulate.



Set per somministrazione:

Multimedical propone una linea di set per la terapia oncologica.

Sistemi a circuito chiuso per la manipolazione in sicurezza di materiali e soluzioni contenenti sostanze pericolose.

I deflussori presentano una o più valvole di non ritorno per il collegamento indipendente e la somministrazione sequenziale di uno o più farmaci chemioterapici alternata alla procedura di lavaggio e un rubinetto con accesso luer lock femmina con valvola needlefree per la somministrazione estemporanea di soluzioni farmacologiche senza l'utilizzo di aghi.

La presenza di un sistema a circuito chiuso e la possibilità di chiudere e aprire le vie di collegamento dei chemioterapici assicurano di operare in sicurezza diminuendo il rischio di contaminazione per l'ambiente e il personale sanitario e di eliminare l'intero set come un dispositivo completo alla fine della terapia.

Disponibili set con filtro in linea 0,22 micron per formulazioni chemioterapiche a veicolo lipofilo (es. taxani).

Disponibilità set in materiale totalmente oscurato per soluzioni fotosensibili e in materiale NO PVC.

Set for administration:

Multimedical offers different set for oncological therapy.

Closed System for safety handling of materials and solutions containing dangerous substances.

Infusion set have one or more no return valve for independent connection and the sequential administration of one or more chemotherapy drugs alternating with washing procedure and one stopcock with female luer lock access with needlefree valve for the extemporaneous administration of solution drug without using needle.

The presence of a closed system and the possibility of closing and opening the way of connection of chemotherapies ensure to operate safely reducing the risk of environmental contamination and of health personnel and to eliminate the whole set as a complete device at the ending of therapy.

Available set with in line filter 0,22 micron for chemotherapy formulations with a lipophilic vehicle (ex. taxanes).

Available set with obscured material for photosensitive solutions and in NO PVC material.



Tutti i dispositivi sono latex free e DEHP free / Every devices are latex free and DEHP free